

テンス Tens 21

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator



様々な症状に「最大限の効果」を尽くす ～31種類の治療法～

例えば腰が痛い場合、コリと痛みでは症状が異なるため、その治療法も異なりますが、これまでの家庭用治療器は、「部位(腰)」に対する基本治療をするのみでした。そこで、Tens21は新たに「症状別」のモードを設け、「部位(腰)」の「症状別」に対応できる細やかな治療を実現しました。その治療法はなんと31種類。当社治療器の中では最も治療バリエーションが多く、様々な症状に対して、最大限の効果を引き出せる理由から業務用としても採用されています。



肩・首筋

腰

上肢

下肢

肘・膝

治療部位と症状を自由に組み合わせ

こり

痛み

疲れ

血行


麻痺

この他にもボタン1つで簡単に全身治療等が行える「オート治療プログラム」、モードとお好みの刺激でマッサージが行える「自由選択モード」、上位機種には不可欠な「温熱ヒーター」を標準装備。

この31種類の治療法は「全て異なる周波数の組み合わせ」から成り立っています。「周波数」とは1秒間に伝わる刺激の波の数をいい、この数の大小によって出せる効果の内容も変わってきます。この特性を熟知した上で、より効果が上がる様に周波数を様々な組み合わせたものが「治療のプログラム」となります。

特殊な波形で最大限の心地よさ


一般の波形

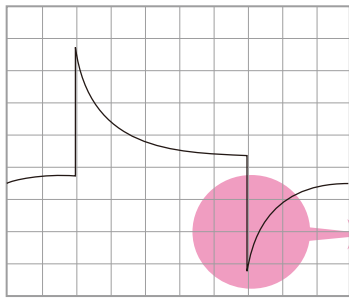

電気の跳ね返りがある

直角波のため通電時、皮膚に鋭い刺激と痛みが走る。

ホーマーイオンの波形

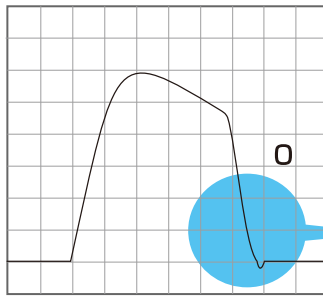

電気の跳ね返りがない

なだらかな角のない波形で通電時の刺激の当たりもソフト。気持ちよさが残る。

人の皮膚は、本来電気を通しにくい性質のため、通電時の電気抵抗で、チクチク・ピリピリと感じてしまいます。ホーマーイオンは、この電気抵抗を抑え、マイルドな通電が行える波形を採用。これにより皮膚に痛みを感じずに、深部まで電気治療を施すことが可能になりました。



手元で、治療の強さや左右のバランスが調整できます。おやすみ前に、お布団の中での使用など導子装着後、機器本体に手が届かない場合に便利です。

ご愛用者の声

- 「大変良いです。長年痛みがあった足が良くなりました。みんなで使用しています。痛みのある方に教えたいくらいです。」 福岡県 58歳女性
- 「かさばらないので、自分のいつも座っているそばに置いて、テレビを観ながら毎日使用しています。肩こりや手のしびれがあるので、これからも使っていきます。」 大阪府 62歳女性
- 「今までは肩こりや腰痛、関節にも痛みがあったのですが、毎日通電するのが楽しみになりました。安眠できるようになりました。腸のマッサージにも使っています。」 愛知県 61歳女性

※効果には個人差があります。

安心

2年間保証

お得

電気代1ヶ月13円

仕様

承認・許可番号

医療機器承認番号 21200BZZ00634
低周波治療器

電氣的仕様

定格電源電圧：～100[V] (50/60Hz)
定格消費電力：23 [W]
最大治療電流：19 [mA] (1 K Ω 負荷接続時)
治療周波数：自由選択 (3～1000[Hz])
治療パターン選択 (3～245[Hz])
オート治療プログラム選択 (3～250[Hz])
バランス調整：左右出力差 \pm 25%
タイマー：最長15分 (1分毎に設定)
温熱導子設定：最高43 $^{\circ}$ C (5段階調整)

寸法・重量・付属品

寸法：幅 378 \times 奥行 280 \times 高さ 210[mm]
重量：本体3.7[Kg]
付属品：手元出力調整器・温熱導子 (大1個、小2個)
ベルト (大1本、小2本)・導子ベルトコネクター (3個)
導子コードキーパー (2個)・本体ビニールカバー (1枚)
予備ヒューズ (1本)

危険



・下記のような医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。
ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、心電計などの装着形の医用電気機器

社団法人 日本ホームヘルス機器協会

 株式会社 **ホーマーイオン研究所**
東京都渋谷区神泉町17-2

お客様相談室フリーダイヤル

 **0120-0842-39**
オハヨーニ サンキュウ



ISO9001
JQA-QMA10316



ISO13485
JQA-MD0002