



# 機器の準備

- 1 ①出力コードを本体の出力コード接続口に差し込みます。  
②ACアダプターのプラグを本体のACアダプター接続口(電源)に接続した後、コンセントに差し込み、機器本体に電源を供給します。  
➡ 3つのモード選択スイッチが青色に点滅します。

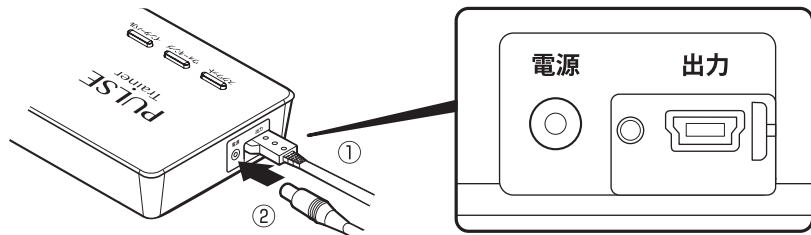


- 2 出力調節ツマミを「0」の位置にセットします。

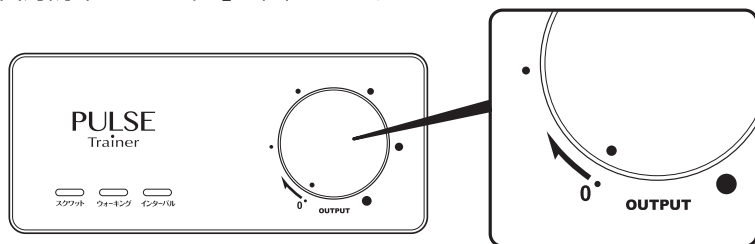


- 3 ベルト導子の布全体に水またはお湯を含ませます。

\* 乾いた布の色が変わる程度が適量です。  
過剰になると水が滴りますので、その際は  
タオル等で拭いてください。

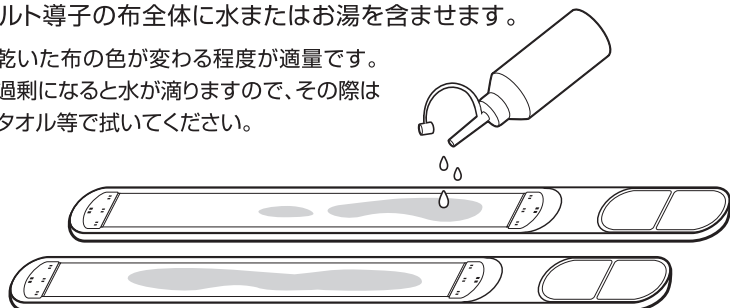

- 4 ベルト導子を膝上に巻き付け、密着させます。

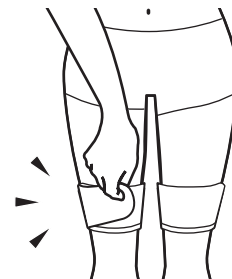

## 注意



- ベルト導子の変形するくらい伸ばして留めないでください。  
止血及びベルト導子が破損する場合があります。


## 出力コードの取り扱いについて

出力コードは、以下のようにお取り扱いください。

### 良い例



フック部の側面を持って  
取り扱ってください。

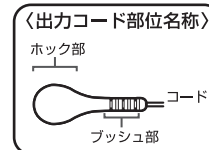

### 悪い例



プッシュ部やコードを持って、取り扱わないでください。  
断線など故障の原因となります。